


Electrodes Perfect mama

4 Reuseable Electrode Pads

REF E-C50100PM

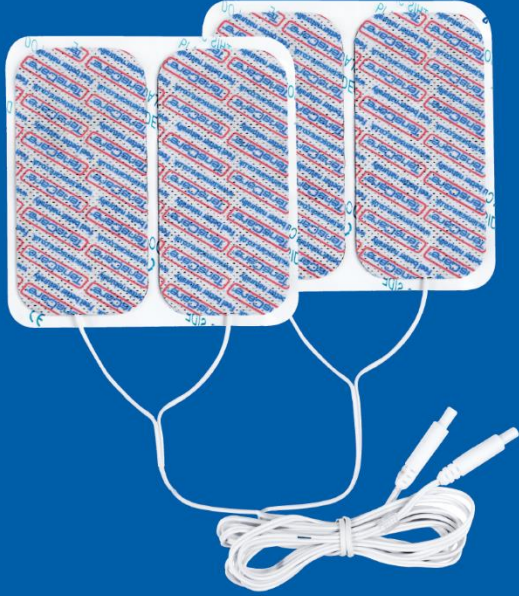

Instructions For Use
Please read carefully before use

TensCare™



Set of 4 electrode pads with integrated lead wires for **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** or **perfect mama+**.



Juego de 4 electrodos con cable integrado para **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** o **perfect mama+**.



Lot de 4 électrodes avec câble de branchement intégré pour **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** ou **perfect mama+**.



Packung von 4 Elektroden mit integriertem Anschlusskabeln für **mamaTENS**, **perfect mamaTENS** oder **perfect mama+**.

TensCare™

www.tenscare.co.uk

TensCare Europe BV
Hasselaarsweg 18,
1704 DW, Heerhugowaard,
Netherlands



I-CM50100PM-MLS Rev 3.2 06/23


Advena Ltd.
Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street,
Swatara, BKR 4013, Malta

EC REP

TensCare Ltd.
9 Blenheim Rd, Epsom,
Surrey, KT19 9BE, UK
+44 (0)1372 723 434



Distributed by:

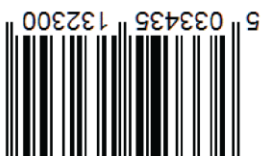

Application of pads:

1. Remove the pads from their storage bag. Unravel the lead wires.
2. After first ensuring that the **mamaTENS, perfect mamaTENS or perfect mama+** is switched off, with the electrodes still on the plastic liner, insert the two lead wire plugs into the unit.
3. Establish where the electrode pads are to be placed. This will be *either* as indicated in the Instruction Manual *or* in accordance with the advice of your midwife or medical practitioner.
4. Where the pads are to be applied wash the skin and dry thoroughly. Make sure the skin is free of oil-based creams/lotions as this can ruin the self-adhesive gel.
5. Place the centre of the pad onto the skin and then smooth down and around the pad edges. Retain the protective liners so that after use the pads may be stored without damage to themselves.
6. During use, ensure that the lead wires to all four pads remain slack and that none are under any tension at all. Failure to do this may result in pad failure.

Removal of pads:

1. After use, ensure that the **mamaTENS, perfect mamaTENS or perfect mama+** is switched off before removing the pads from the skin.
2. Remove pads by peeling from the edge. Do NOT pull on the lead wire.
3. In between use, replace pads onto their protective liners and place them back into the storage bag and seal.

Important:

1. Observe all the Contraindications, Cautions and Warnings included with the device that you are using with these electrodes.
2. Pads are for single patient use only.
3. Do not apply pads to broken skin or to skin without normal sensation.

Warnings



Do not ignore any allergic reaction to the electrode pads: If a skin irritation develops, stop using device, as a small number of users may have an adverse reaction to the gel.



For use only with Nerve Stimulators approved to EN 60601-1 and EN60601-2-10



Aplicación de los electrodos:

1. Retire los parches de la funda. Desenrede los cables conductores.
2. Estando el **mamaTENS, perfect mamaTENS o perfect mama+** apagado, con los electrodos aún en la base de plástico, inserte los dos conectores de cable a la unidad.
3. Establezca dónde colocar los parches. Tal cual se indica en el manual.
4. Antes de colocar los parches lave la piel y séquela. Asegúrese de que la piel está libre de cremas a base de aceite o lociones ya que esto puede arruinar el gel auto-adhesivo.
5. Coloque el centro del electrodo sobre la piel y pegue el resto. Conserve la base protectora de modo que después de su usar los electrodos pueda guardarlos de nuevo en la misma.
6. Durante el uso, asegúrese de que los cables conductores de los cuatro parches permanezcan flojos y que ninguno este tirante. De lo contrario, la almohadilla puede fallar.

Retirada de los parches:

1. Después de su uso, asegúrese de que la unida esté apagada antes de retirar los parches de la piel.
2. Despegue los parches desde uno de los bordes. NO tire del cable.
3. Entre usos, reemplace los parches en sus bases plásticas y colóquelas en la bolsa de almacenamiento.

Importante:

1. Observar todas las contraindicaciones, precauciones y advertencias incluidas con el dispositivo que se esté usando con los electrodos.
2. Las almohadillas deben usarse por un solo paciente.
3. No aplique los parches de electrodo en piel herida o con poca sensibilidad.

Advertencias:



No ignore ninguna reacción alérgica a los electrodos: si se desarrolla una irritación en la piel, dejar de usar el dispositivo, ya que un pequeño número de usuarios puede tener una reacción adversa al gel.



Para solo uso con estimuladores nerviosos aprobados según EN 60601-1 y EN60601-2-10

Application des électrodes :

1. Retirez les électrodes de la feuille plastique de protection. Ne tirez pas sur les fils.
2. Après s'être assuré que l'appareil est éteint, avec les électrodes toujours collées sur la feuille plastique, insérez les deux câbles dans l'appareil.
3. Établissez le positionnement des électrodes en consultant le mode d'emploi.
4. Vérifiez que la peau est propre et sèche à l'endroit du positionnement des électrodes. Vérifiez qu'il n'y a pas de crème ou lotion, ceci pourrait endommager les électrodes.
5. Placez les électrodes en commençant par le centre puis lissez jusqu'au coins. Conservez la feuille plastique de protection pour remettre les électrodes après utilisation.
6. Pendant l'utilisation, vérifiez que les câbles des 4 électrodes restent bien connectés et qu'ils ne sont pas non plus sous tension. Les câbles pourraient être endommagés.

Le retrait des électrodes :

1. A la fin de l'utilisation, vérifiez que le **mamaTENS, perfect mamaTENS ou perfect mama+** est éteint avant de retirer les électrodes.
2. Retirez les électrodes de la peau en douceur. NE tirez PAS sur les câbles.
3. Remplacez les électrodes sur la feuille plastique de protection, puis remettez-les dans la pochette en plastique refermable.

Important :

1. Veuillez respecter les contre-indications, précautions et avertissements inclus avec l'appareil avec lequel vous utilisez ces électrodes.
2. Les électrodes sont pour l'usage d'un seul et même patient.
3. Ne pas appliquer sur une peau avec une sensibilité anormale ou sur une peau abîmée.

Avvertissements : Ne négligez aucune réaction allergique aux électrodes : Si une irritation cutanée se développe, arrêtez d'utiliser le dispositif, car un petit nombre d'utilisateurs peut avoir une réaction indésirable au gel. A n'utiliser qu'avec des stimulateurs de nerfs approuvés selon les normes EN 60601-1 et EN60601-2-10.



Anwendung von pads:

1. Entfernen Sie die Elektroden von ihrem Aufbewahrungsbeutel.
2. Sicherstellen, dass der **mamaTENS, perfect mamaTENS oder perfect mama+** ausgeschaltet ist, Elektroden noch auf dem Kunststoff-Liner, stecken Sie die beiden Kabeln in das Gerät.
3. Stellen Sie fest, wo die Elektrodenpads platziert werden sollen. Dies wird entweder als Die in der Gebrauchsanweisung.
4. Wenn die Elektroden angewendet werden sollen, waschen Sie die Haut und trocknen Sie sie sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass die Haut frei von Öl-basierten Cremes / Lotionen ist, da dies das selbstklebende Gel zerstören kann.
5. Platzieren Sie die Mitte des Elektrode auf die Haut und dann glatt und um die Elektroden-Kanten. Halten Sie die Schutzfolien so, dass sie nicht beschädigt werden können.
6. Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass die Kabeln an allen vier Elektroden schlaff bleiben und dass keiner unter Spannung steht. Andernfalls kann es zu einem Pad-Ausfall kommen.

Entfernen der pads:

1. Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass das **mamaTENS, perfect mamaTENS oder perfect mama+** ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektroden von der Haut entfernen.
2. Entfernen Sie die Elektroden, indem Sie von der Kante abziehen. Ziehen Sie NICHT am Anschlusskabel.
3. Dazwischen die Elektroden auf ihre Schutzfolien tauschen und wieder in den Aufbewahrungsbeutel legen und abdichten.

Wichtig:

1. Beachten Sie die Kontraindikationen, Vorsichtinweise und Warnungen, die dem Gerät beigefügt, das Sie mit den Elektrodenpads verwenden.
2. Pads sind nur für Einzelpatienten geeignet.
3. Wenden Sie keine Pads auf gebrochene Haut oder auf Haut ohne normale Empfindung.

Warnungen: Ignorieren Sie eine allergische Reaktion auf die Elektroden nicht: Wenn eine Hautreizung auftritt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da eine kleine Anzahl von Benutzern eine unerwünschte Reaktion auf das Gel zeigen kann. Nur zur Verwendung mit Nervenstimulatoren, die gemäß EN 60601-1 und EN60601-2-10 zugelassen sind.

